


228.5 ±5

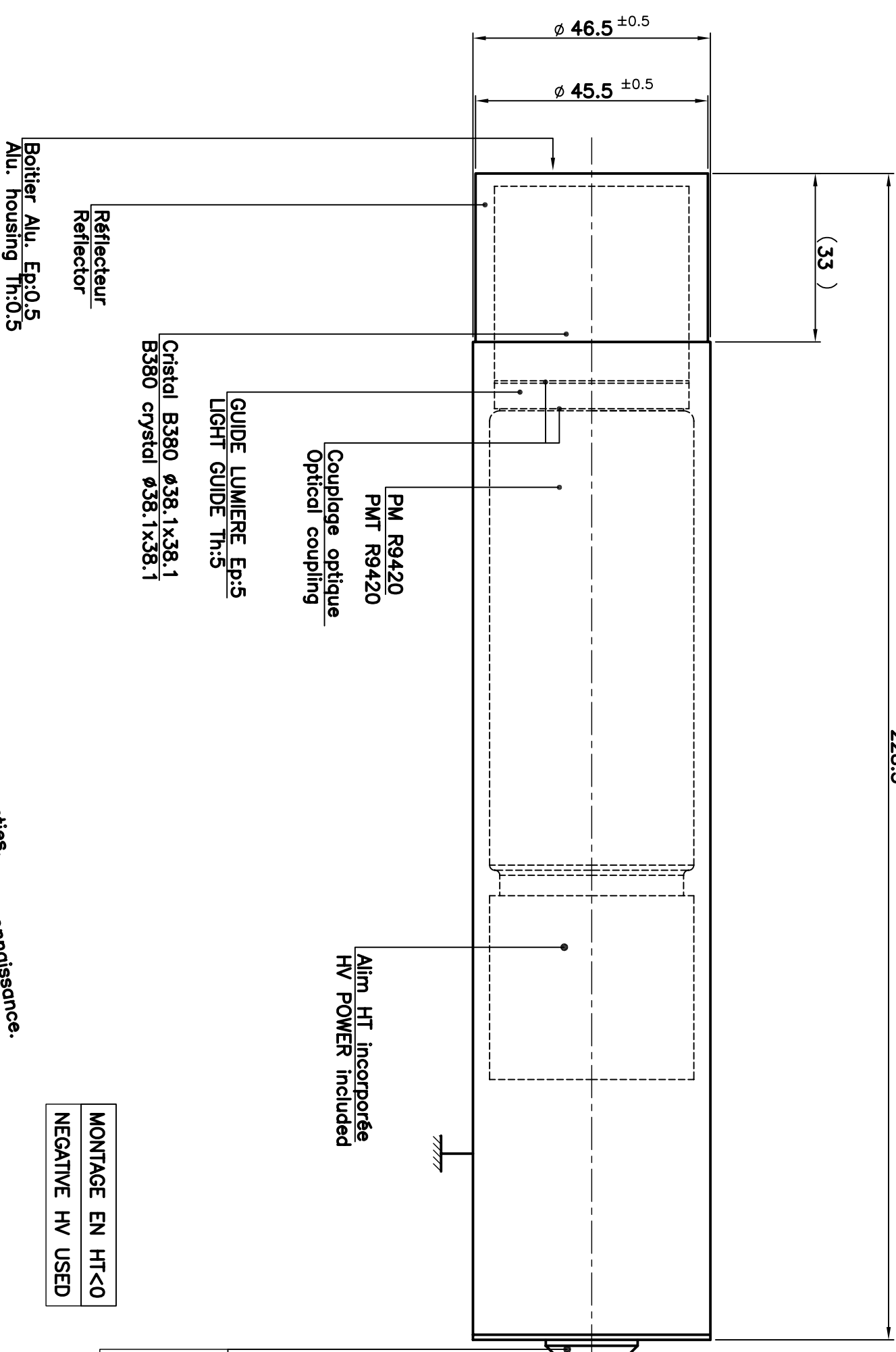

Alim HT incorporée
HV POWER included

Boîtier Alu. Ep:0.5
Alu. housing Th:0.5

Réflecteur
Reflector


Cristal B380 ø38.1x38.1
B380 crystal ø38.1x38.1

GUIDE LUMIERE Ep:5
LIGHT GUIDE Th:5

Couplage optique
Optical coupling

PM R9420

MONTAGE EN HT<0
NEGATIVE HV USED

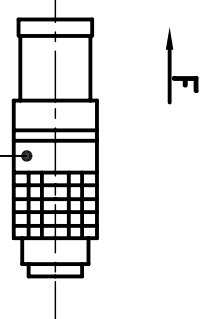


Fiche LEMO FGG.0K.304.CLAC.45
LEMO PLUG FGG.0K.304.CLAC.45

EMBASE LEMO EGG.0K.304.CLL

- 1--> SIGNAL
 - 2--> MASSE
 - 3--> ALIMENTATION BT +5V
 - 4--> REGLAGE DE LA HT 1V/1000V
- LEMO SOCKET EGG.0K.304.CLL
- 1--> SIGNAL
 - 2--> GROUND
 - 3--> LOW VOLTAGE POWER SUPPLY +5V
 - 4--> HV SETTING 1V/1000V

PROTOTYPES: nucléaires non garanties.
Performances sur la base de notre meilleure connaissance.
Conception sur la base de notre meilleure connaissance.

PROTOTYPES: performances guaranteed.
No nuclear design on a best effort basis.

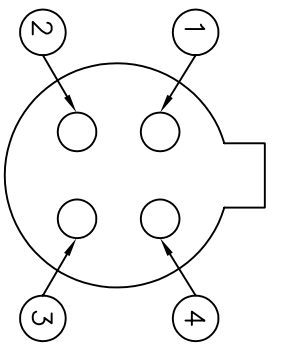

EMBASE
SOCKET

965662
965595
965634
749501

Ind.	Date	Dess.	MODIFICATIONS	Date	Vérif.
-	-	-	-	-	-
C	03/05/09	P.A	MISE A JOUR SUITE A MODIFICATION DE LA CONCEPTION	09/06/09	GG
B	06/05/09	C.J	CHANGER MASSE EN PIN N°2 SURNANT BE932	06/05/09	JF
A	14/04/09	C.J	AJOUTER GL	04/04/09	JF

TOLERANCES GENERALES : (ISO 2768-mK) SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

Propriété de la société **SAINT-GOBAIN CRISTAUX** ce plan ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers qu'avec notre autorisation écrite.

Date: 01/04/09
Dess: P.Artis
Date: 02/04/09
Vérif: JF
Ech: 1/1

Ensemble: SCINTIBLOC 38 SE 38 /1.5/Alim/B380
(PM R9420-HV MODULE)

Détail:

Ref.BE: 2.3.6382

A3

SAINT-GOBAIN CRYSTALS
Saint Pierre les Nemours - France

2 - 3 - 7 1 2 6
Indice C -